




Royyt+ Mini-Körperwaage

VFS335-Serie

BENUTZERHANDBUCH

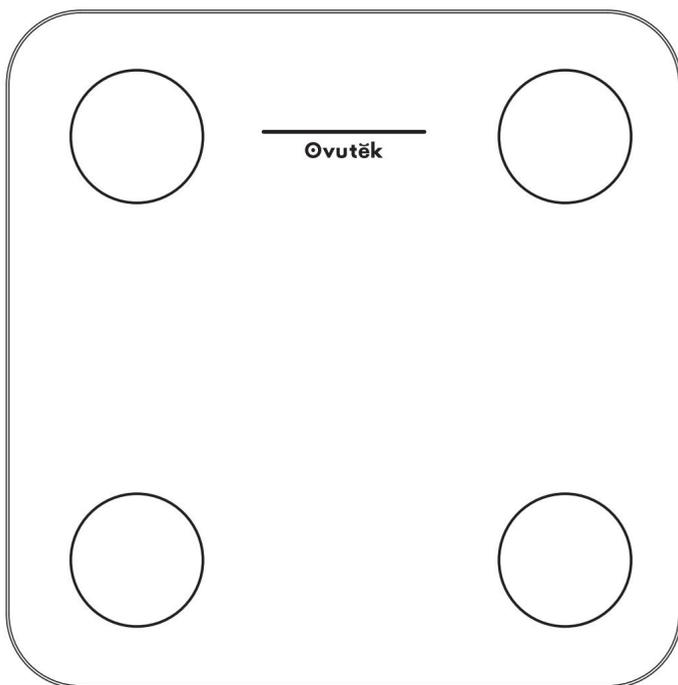

Fragen oder Bedenken?

Kontaktieren Sie unser Kundensupport-

Team unter service@ovutek.com

Wir möchten, dass Sie gesund und glücklich sind.

Vielen Dank, dass Sie sich für Ovutek entschieden haben!

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich
bitte jederzeit an unser hilfsbereites Kundensupportteam unter **service@ovutek.com**.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren neuen Produkten!

Inhaltsverzeichnis

Packungsinhalt	1
Technische Daten	1
Anzeigesymbole	1
Sicherheitshinweise	1
Funktionsdiagramm	2
Vor dem ersten Gebrauch	3
Verwenden der Waage	3
Nullstrommodus	3
Auswechseln der Batterien	4
Reinigen der Waage	4
Fehlerbehebung	4
Erklärung zur Störungsbeurteilung der Federal Communication Commission	6
Garantieinformationen	7
AGB	7
Kundenservice	8

Packungsinhalt

- 1 x Körperfettwaage,
- 2 x 1,5 V AAA-Batterien
- 1 x Kurzanleitung

Technische Daten

Gewichtskapazität	400 lb / 180 kg D
Inkrement	= 0,2 lb / 0,1 kg
Mindestgewichtswert	lb / kg
Gewichtseinheiten	0,2 lb / 100 g
Plattform	Gehärtetes Glas
Stromversorgung	2 x 1,5 V AAA-Batterien
Automatische Abschaltung	15 Sekunden
Maße	10,2 x 10,2 x 0,94 Zoll / 26 x 26 x 2,4 cm
Gewicht	1,0 kg
Betriebssysteme	iOS® 12.0+ / Android™ 7.0+

Anzeigesymbole

	Schwache Batterie (Batterien müssen gewechselt werden)
	Verbindung für die Synchronisierung der Telefon-App aktiviert.
	Der Nullstrommodus ist aktiviert (elektrischer Strom deaktiviert). Die Waage misst nur Gewicht und BMI).
	Schwache Batterie (Batterien müssen gewechselt werden)
	Das Ergebnis kann aus irgendeinem Grund ungenau sein. Wir empfehlen Ihnen, erneut zu messen.
	Überlastung. Das Gewicht übersteigt 403 lb / 183 kg.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen und Sicherheitshinweise in diesem Handbuch.

Allgemeine Verwendung

- Überprüfen Sie die Waage vor der Verwendung. Verwenden **Sie die Waage nicht**, wenn sie beschädigt ist.
- Schlagen oder klopfen **Sie nicht** auf die Waage und verwenden **Sie die Waage nicht**, wenn das Glas einen kleinen Riss aufweist. Aufgrund der Beschaffenheit von gehärtetem Glas zerspringt das Glas bei einem kleinen Riss.
Wenn Sie einen Riss sehen, wenden Sie sich an **den Kundendienst** (siehe Seite 8).
- Die Glasplattform ist bei Nässe rutschig. Stellen Sie **immer** sicher, dass die Plattform und Ihre Füße trocken sind, bevor Sie die Waage betreten.
- Stellen Sie die Waage auf eine harte, ebene Fläche.
- Für ein sicheres und genaues Wiegen stellen Sie sich schulterbreit auf die Waage. Stellen **Sie sich nicht** auf den Rand der Waage und springen Sie nicht auf die Waage.
- **Vermeiden Sie es**, längere Zeit auf der Waage zu stehen.
- **Überlasten Sie die Waage nicht**. Die maximale Gewichtskapazität beträgt 400 lb / 180 kg.
- Bewahren Sie die Waage an einem kühlen Ort mit geringer Luftfeuchtigkeit auf. Halten Sie die Waage von Wärmequellen wie Öfen oder Heizungen fern.
- Lagern Sie die Waage horizontal, **nicht** vertikal.
- Nur für den Hausgebrauch. Diese Waage ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Vorsichtig handhaben.

Batterien

- Mischen **Sie keine** neuen und alten Batterien.
- Wenn die Waage längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterien, um die Lebensdauer der Waage zu verlängern.

Funktionsdiagramm

A. Anzeige

B. Plattform

C. Leitfähige Bereiche

D. Einheitentaste

E. Batteriefach

F. Anti-Rutsch-Polsterung



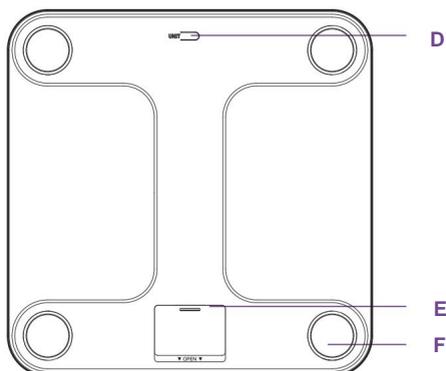


Abbildung 1

Vor dem ersten Gebrauch

1. Der Akku ist bereits im Gerät vormontiert.
2. Ziehen Sie die Isolierfolie vom Batteriefach ab.

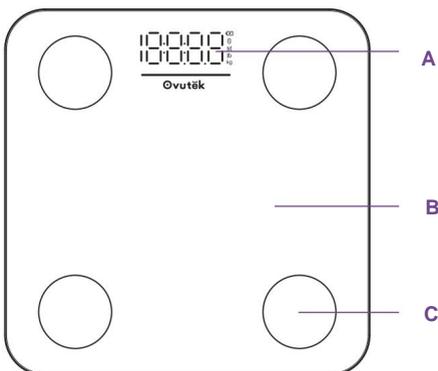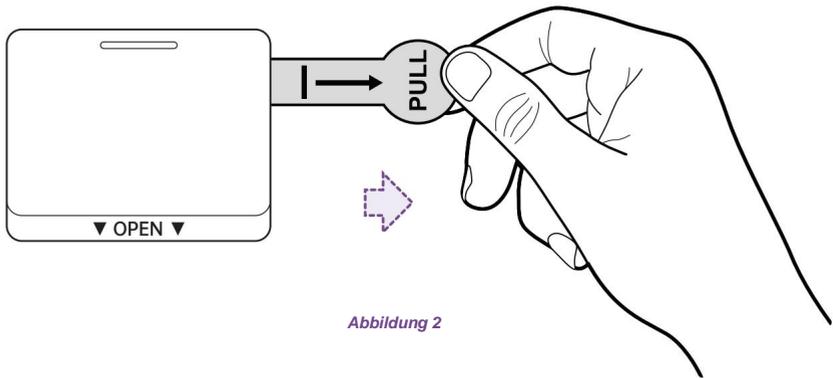

Verwenden der Waage

- Drücken Sie die **UNIT** Taste auf der Unterseite der Waage, um die Einheiten umzuschalten zwischen Pfund (lb) und Kilogramm (kg).
1. Stellen Sie die Waage auf eine harte, ebene Fläche (keinen Teppich oder keine Matte).
 2. Stellen Sie sich einfach darauf und die Waage zeigt Ihr Gewicht in Echtzeit an.
 3. Die Anzeige blinkt mehrmals, bevor Ihr endgültiger Messwert angezeigt wird.

Nullstrommodus

- Nullstrommodus für Schwangere oder Personen mit implantiertem medizinischem Gerät.
1. Wählen Sie in der App den Nullstrommodus, um ihn ein- oder auszuschalten.
 2. Wenn Sie die Funktion einschalten, wird die Stromzufuhr zu Ihrer Waage unterbrochen und Ihre Waage kann keine anderen Körperindikatoren als Gewicht und BMI berechnen.

Abbildung 3

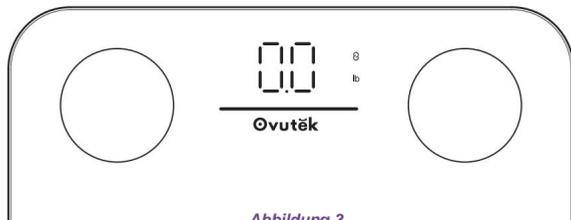


Abbildung 3

Auswechseln der Batterien

- Auf dem Display erscheint  Und  wenn die Batterien ausgetauscht werden müssen.

Abbildung 4

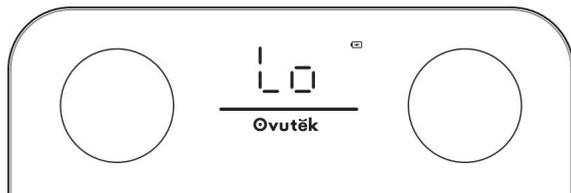


Abbildung 4

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der Waage.
2. Entnehmen Sie die alten Batterien und entsorgen Sie diese fachgerecht.
3. Legen Sie zwei neue 1,5-V-AAA-Batterien ein. Achten Sie auf die richtige Polarität.
4. Schließen Sie das Batteriefach und stellen Sie die Waage auf eine harte, ebene Fläche.

Reinigen der Waage

1. Reinigen Sie die Oberfläche der Waage mit einem leicht feuchten Tuch und wischen Sie anschließend die restliche Feuchtigkeit mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
2. Verwenden Sie zum Reinigen der Waage keine chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Waage funktioniert nicht einschalten.	Keine Batterie installiert.	Nehmen Sie die mitgelieferte Batterie aus der Verpackung und installieren Sie sie, indem Sie die + und - Anschlüsse gemäß der Anleitung in der Batteriebox aufeinander abstimmen.
	Die Batterien sind leer.	Ersetzen Sie die Batterien. Siehe „Ersetzen der Batterien“ (Seite 4).
	Batterien sind nicht ordnungsgemäß installiert ist.	Legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein, wie im Batteriefach markiert.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Display-Hintergrundbeleuchtung geht nicht an beim Betreten der Waage.	Skala kann Fehlfunktion.	Kontaktieren Sie den Kundendienst (siehe Seite 8).
Nicht in der Lage Körperzusammensetzung messen	Tragen Sie Socken/Schuhe oder berühren Sie keine leitfähigen Bereiche.	Stellen Sie sicher, dass Sie barfuß sind und auf dem leitfähigen Bereich der Waage stehen.
	Der Nullstrommodus ist An.	Überprüfen Sie den APP-Zero-Cueent-Modus wechseln oder prüfen, ob  leuchtet auf dem Skalenanzeige
	Die Füße sind zu trocken oder zu nass.	Versuchen Sie, etwas Lotion aufzutragen und erneut zu messen (zu trockene Füße können die Bioimpedanzinformationen beeinträchtigen), tion von der Messung ausgeschlossen)
Auf dem Display erscheint  .	Gewicht übersteigt 400 lb / 180 kg	Entnehmen Sie das Gewicht von der Waage. Verwenden Sie eine andere Waage mit einem höheren Wägebereich.
Auf dem Display erscheint  Und  .	Nicht genug Leistung.	Ersetzen Sie die Batterien. Siehe „ Ersetzen der Batterien “ (Seite 4).
Auf dem Display erscheint  .	Das Ergebnis vielleicht ungenau aufgrund aus irgendeinem Grund.	Stellen Sie die Waage auf eine harte, ebene Fläche und führen Sie die Messung erneut durch.
Lesen ist ungenau.	Die Waage steht nicht auf einer harten, flachen Oberfläche.	Stellen Sie die Waage auf eine harte, ebene Fläche (keinen Teppich oder keine Matte).
	Kalk wurde nicht gelöscht richtig.	Um die Waage zurückzusetzen, nehmen Sie die Batterien für 45 Sekunden heraus und legen Sie sie wieder ein.

Wenn Ihr Problem nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an **den Kundendienst** (siehe Seite 8).

Erklärung zur Störungsbeurteilung der Federal Communication Commission – Teil 15

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und
2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor Störungen bei der Installation in Wohngebäuden bieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und strahlt Hochfrequenzenergie ab. Bei unsachgemäßer Installation und Verwendung kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüft werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie ihren Standort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der Empfänger.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

FCC-Warnung: Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts führen.

FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung in unkontrollierten Umgebungen. Endbenutzer müssen die spezifischen Betriebsanweisungen zur Einhaltung der HF-Belastungsvorschriften befolgen. Um die FCC-Anforderungen zur HF-Belastung einzuhalten, befolgen Sie bitte die Betriebsanweisungen in diesem Handbuch. Dieser Sender darf nicht am selben Standort wie andere Antennen oder Sender aufgestellt oder zusammen mit diesen betrieben werden. Die Verfügbarkeit bestimmter Kanäle und/oder Frequenzbänder ist länderabhängig und wird werkseitig per Firmware auf das jeweilige Zielgerät abgestimmt. Die Firmware-Einstellungen sind für den Endbenutzer nicht zugänglich.

Garantieinformationen

Produktname:	Royyt+ Mini-Körperfettwaage
Modell:	
Zu Ihrer eigenen Information empfehlen wir Ihnen dringend, Ihre Bestellnummer und das Kaufdatum aufzuschreiben.	
Bestellnummer:	
Kaufdatum:	

AGB

Ovutek garantiert dem Erstkäufer, dass dieses Produkt bei normaler Verwendung und unter normalen Bedingungen für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Ovutek verpflichtet sich, während der Garantiezeit nach eigenem Ermessen jeden Material- oder Verarbeitungsfehler zu beheben oder im Austausch kostenlos ein gleichwertiges Produkt bereitzustellen, vorbehaltlich der Überprüfung des Defekts oder der Fehlfunktion und des Nachweises des Kaufdatums.

Es besteht keine weitere ausdrückliche Garantie. Diese Garantie gilt nicht:

- Wenn das Produkt von seinem ursprünglichen Zustand verändert wurde;
- Wenn das Produkt nicht gemäß den Anweisungen und Hinweisen in der Bedienungsanleitung verwendet wurde;
- Für Schäden oder Mängel, die durch Unfall, Missbrauch, Zweckentfremdung oder unsachgemäße bzw. unzureichende Wartung verursacht wurden;
- Für Schäden oder Mängel, die durch die Wartung oder Reparatur des Produkts durch einen nicht autorisierten Dienstleister oder durch eine andere Person als Ovutek verursacht wurden;
- Für Schäden oder Mängel, die bei gewerblicher Nutzung, Vermietung oder einer anderen Nutzung auftreten, für die das Produkt nicht vorgesehen ist;
- Für Schäden oder Mängel, die den Preis des Produkts übersteigen.

Ovutek haftet nicht für indirekte, zufällige oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung des von dieser Garantie abgedeckten Produkts.

Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer des Produkts und ist nicht auf nachfolgende Besitzer des Produkts übertragbar, unabhängig davon, ob das Produkt während der angegebenen Garantielaufzeit übertragen wird.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte, die von nicht autorisierten Verkäufern gekauft wurden.

Die Garantie von Ovutek erstreckt sich nur auf Produkte, die von autorisierten Verkäufern gekauft wurden, die den Qualitätskontrollen von Ovutek unterliegen und sich bereit erklärt haben, deren Qualitätskontrollen zu befolgen.

Alle stillschweigenden Garantien sind auf die Dauer dieser beschränkten Garantie beschränkt.

Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Darüber hinaus stehen Ihnen möglicherweise weitere Rechte zu, die je nach Bundesstaat unterschiedlich sind. In einigen Bundesstaaten ist der Ausschluss oder die Einschränkung von Neben- oder Folgeschäden nicht zulässig. Daher gelten die oben genannten Einschränkungen oder Ausschlüsse möglicherweise nicht für Sie.

Sollten Sie innerhalb der angegebenen Garantiezeit einen Defekt an Ihrem Produkt feststellen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter service@ovutek.com. Entsorgen Sie Ihr Produkt NICHT, bevor Sie uns kontaktiert haben. Sobald unser Kundendienst Ihre Anfrage genehmigt hat, senden Sie das Produkt bitte zusammen mit einer Kopie der Rechnung und der Bestellnummer zurück.

Für jedes Ovutek-Produkt gilt automatisch eine 2-jährige Garantie.

Diese Garantie wird gewährt von: Ovutek

Kundenservice

Wenn Sie auf Probleme stoßen oder Fragen zu Ihrem neuen Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unser hilfsbereites Kundensupportteam.

E-Mail: service@ovutek.com

- Bitte halten Sie Ihre Bestellrechnung und Bestellnummer bereit, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren.

Ovutěk®

**Kontaktieren Sie unser Kundensupport-
Team unter service@ovutek.com**



IN CHINA HERGESTELLT