




Balance corporelle Royyt+ Mini

Série VFS335

MANUEL D'UTILISATION

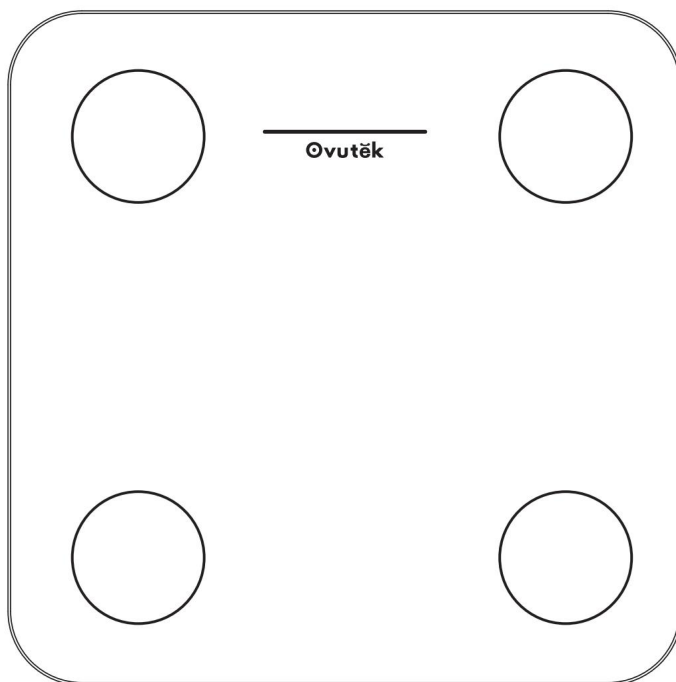

Des questions ou des préoccupations?

Contactez notre équipe de support client

service@ovutek.com

Nous voulons que vous soyez en bonne santé et heureux.

Merci d'avoir choisi Ovutek !

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez
pas à contacter librement notre équipe d'assistance clientèle à l'adresse service@ovutek.com.

Nous espérons que vous apprécierez vos nouveaux produits !

Table des matières

Contenu du colis	1
Caractéristiques	1
Icônes d'affichage	1
Informations de sécurité	1
Diagramme fonctionnel	2
Avant la première utilisation	3
Utilisation de l'échelle	3
Mode courant nul	3
Remplacement des piles	4
Nettoyage de la balance	4
Dépannage	4
Déclaration de la Commission fédérale des communications sur les interférences	6
Informations sur la garantie	7
CONDITIONS GÉNÉRALES ET POLITIQUE	7
Service client	8

Contenu du colis

1 x Balance de graisse corporelle
2 x Piles AAA 1,5 V
1 x Guide de démarrage rapide

Caractéristiques

Capacité de poids	400 lb / 180 kg D
Incréments	= 0,2 lb / 0,1 kg lb /
Valeur de poids minimale	kg 0,2
Unités de poids	lb / 100 g
Plate-forme	verre trempé
Alimentation électrique	2 piles AAA 1,5 V
Arrêt automatique	15 secondes
Dimensions	10,2 x 10,2 x 0,94 po / 26 x 26 x 2,4 cm
Poids	2,2 lb / 1,0 kg
Systèmes d'exploitation	iOS® 12.0+ / Android™ 7.0+

Icônes d'affichage

	Batterie faible (besoin de changer les piles)
	Connexion activée pour la synchronisation de l'application téléphonique.
	Le mode courant nul est activé (courant électrique désactivé). La balance mesurera uniquement le poids et le BMI).
	Batterie faible (besoin de changer les piles)
	Le résultat peut être inexact pour une raison quelconque, nous vous recommandons de remesurer.
	Surcharge. Le poids dépasse 403 lb / 183 kg.

Informations de sécurité

Veuillez lire et suivre toutes les instructions et consignes de sécurité contenues dans ce manuel.

Utilisation générale

- Vérifiez la balance avant utilisation. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
 - Ne frappez pas la balance et ne l'utilisez pas si le verre présente une légère fissure. En raison de la nature du verre trempé, une légère fissure peut entraîner sa rupture.
Si vous voyez une fissure, contactez [le support client](#) (voir page 8).
 - La plateforme en verre est glissante lorsqu'elle est mouillée. Assurez-vous toujours que la plateforme et vos pieds sont secs avant de monter sur la balance.
 - Placez la balance sur une surface dure et plane.
 - Pour une pesée sûre et précise, tenez-vous debout sur la balance, les pieds écartés à la largeur des épaules. Ne montez pas sur le bord de la balance et ne sautez pas dessus.
 - Évitez de rester debout sur la balance pendant une période prolongée.
 - Ne surchargez pas la balance. Sa capacité maximale est de 180 kg.
 - Conservez la balance dans un endroit frais et peu humide. Éloignez-la des sources de chaleur, telles que les fours ou les radiateurs.
-
- Rangez la balance horizontalement et non verticalement.
 - Pour usage domestique uniquement. Cette balance n'est pas destinée à un usage commercial.
 - Manipuler avec précaution.

Piles

- Ne mélangez pas des piles neuves et anciennes.
- Si la balance n'est pas utilisée pendant une longue période, retirez les piles pour prolonger la durée de vie de la balance.

Diagramme fonctionnel

UN. Afficher

B. Plate-forme

C. Zones conductrices

D. Bouton d'unité

E. Compartiment à piles

F. Rembourrage antidérapant

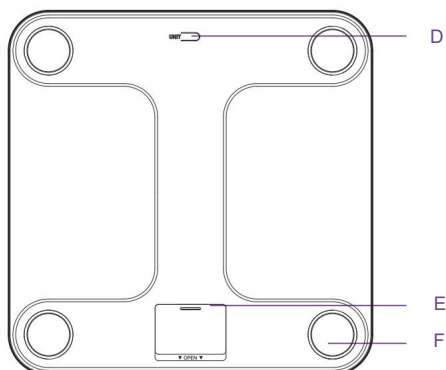
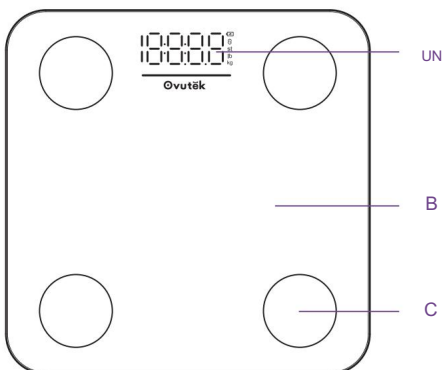


Figure 1

Avant la première utilisation

1. La batterie a été pré-assemblée dans l'appareil.
2. Décollez le film isolant du compartiment à piles.

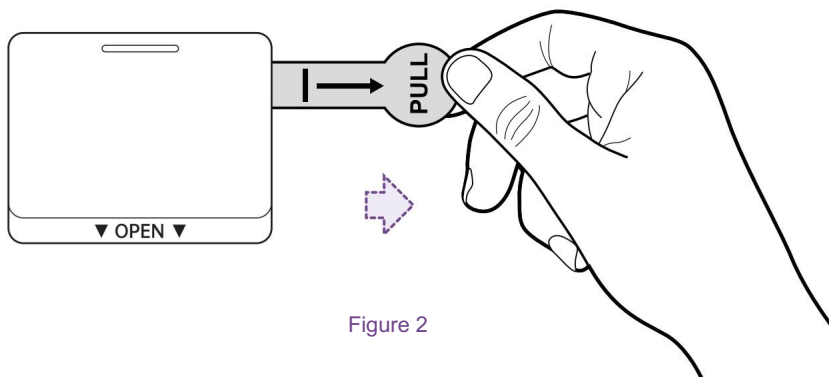


Figure 2

Utilisation de l'échelle

- Appuyez sur le **UNIT** bouton situé sous la balance pour changer d'unités livres (lb) et kilogrammes (kg).
1. Placez la balance sur une surface dure et plane (pas un tapis ou un paillason).
 2. Montez simplement dessus, la balance affichera votre poids en temps réel.
 3. L'écran clignotera plusieurs fois avant d'afficher votre mesure finale.

Mode courant nul

- Mode zéro courant pour les femmes enceintes ou celles qui utilisent un dispositif médical implanté.
1. Sélectionnez le mode zéro courant dans l'application pour activer ou désactiver.
 2. Lorsqu'il est allumé, le courant de votre balance sera coupé et votre balance ne pourra pas calculer d'autres indicateurs corporels que le poids et l'IMC.

Figure 3

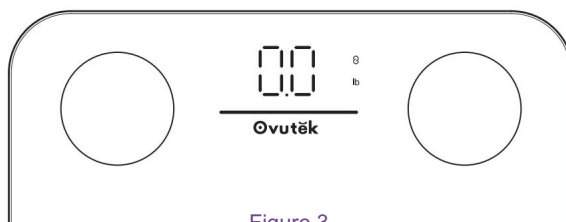


Figure 3

Remplacement des piles

- L'écran affichera



et



lorsque les piles doivent être remplacées.

Figure 4



Figure 4

1. Ouvrez le compartiment à piles situé sous la balance.
2. Retirez les piles usagées et jetez-les correctement.
3. Installez 2 piles AAA 1,5 V neuves. Assurez-vous que les polarités correspondent.
4. Fermez le compartiment à piles, placez la balance sur une surface dure et plane.

Nettoyage de la balance

1. Utilisez un chiffon légèrement humide pour nettoyer la surface de la balance, suivi d'un chiffon doux et sec pour essuyer l'humidité restante.
2. N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques ou abrasifs pour nettoyer la balance.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'échelle ne allumer.	Aucune batterie installée.	Récupérez la batterie incluse dans l'emballage et installez-la en faisant correspondre les bornes + et - conformément au guide dans le boîtier de la batterie.
	Les piles sont mortes.	Remplacez les piles. Voir Remplacement des piles (page 4).
	Les piles ne sont pas correctement installé.	Insérez les piles en respectant la polarité indiquée sur le compartiment à piles.

Problème	Cause possible	Solution
Rétroéclairage de l'écran ne s'allume pas en montant sur la balance.	L'échelle peut être dysfonctionnement.	Contactez le support client (voir page 8).
Impossible de mesurer la composition corporelle	Porter des chaussettes/ chaussures ou ne pas toucher les zones conductrices.	Assurez-vous d'être pieds nus et debout sur la zone conductrice de la balance.
	Le mode courant nul est sur.	Vérifiez le mode zéro compte de l'application changer ou voir si  s'allume sur le affichage de l'échelle
	Les pieds sont trop secs ou trop humides.	Essayez d'appliquer une lotion et de remesurer (des pieds trop secs peuvent empêcher l'information de bioimpédance). tion d'être mesurée)
L'écran montre  .	Le poids dépasse 400 lb / 180 kg	Retirez le poids de la balance. Utilisez une autre balance avec une plage de poids plus élevée.
L'écran montre  et  .	Pas assez de puissance.	Remplacez les piles. Voir Remplacement des piles (page 4).
L'écran montre  .	Le résultat peut-être inexact en raison de une raison quelconque.	Placez la balance sur une surface dure et plane et mesurez à nouveau.
La lecture est inexacte.	La balance n'est pas sur une surface dure et plane.	Placez la balance sur une surface dure et plane (pas un tapis ou un paillason).
	L'échelle n'a pas été effacée correctement.	Retirez les piles pendant 45 secondes et remettez-les en place pour réinitialiser la balance.

Si votre problème n'est pas répertorié, veuillez contacter [le support client](#) (voir page 8).

Déclaration de la Commission fédérale des communications sur les interférences – Partie 15

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Attention FCC : Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. Les utilisateurs finaux doivent suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour se conformer aux exigences d'exposition aux radiofréquences. Pour maintenir la conformité aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, veuillez suivre les instructions d'utilisation décrites dans ce manuel. Cet émetteur ne doit pas être placé à proximité ni fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur. La disponibilité de certains canaux et/ou bandes de fréquences opérationnelles dépend du pays et est programmée en usine pour correspondre à la destination prévue. L'utilisateur final n'a pas accès aux paramètres du micrologiciel.

Informations sur la garantie

Nom du produit :	Balance de graisse corporelle Royyt+ Mini
Modèle:	
Pour votre propre référence, nous vous recommandons fortement d'enregistrer votre numéro de commande et la date d'achat.	
ID de commande :	
Date d'achat :	

CONDITIONS GÉNÉRALES ET POLITIQUE

Ovutek garantit à l'acheteur d'origine que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication, dans des conditions d'utilisation normales, pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat d'origine.

Ovutek s'engage, à notre discrétion pendant la période de garantie, à réparer tout défaut de matériau ou de fabrication ou à fournir un produit équivalent en échange sans frais, sous réserve de vérification du défaut ou du dysfonctionnement et de la preuve de la date d'achat.

Il n'existe aucune autre garantie expresse. Cette garantie ne s'applique pas :

- Si le produit a été modifié par rapport à son état d'origine ;
- Si le produit n'a pas été utilisé conformément aux instructions et aux directives du manuel d'utilisation ;
- Aux dommages ou défauts causés par accident, abus, mauvaise utilisation ou entretien inapproprié ou inadéquat ;
- Aux dommages ou défauts causés par l'entretien ou la réparation du produit effectué par un prestataire de services non autorisé ou par toute personne autre qu'Ovutek ;
- Aux dommages ou défauts survenant lors d'une utilisation commerciale, d'une utilisation locative ou de toute utilisation pour laquelle le produit n'est pas destiné ;
- Aux dommages ou défauts dépassant le coût du produit.

Ovutek ne sera pas responsable des dommages indirects, accessoires ou consécutifs liés à l'utilisation du produit couvert par cette garantie.

Cette garantie s'étend uniquement à l'acheteur consommateur initial du produit et n'est pas transférable à un propriétaire ultérieur du produit, que le produit soit transféré ou non pendant la durée spécifiée de la garantie.

Cette garantie ne s'étend pas aux produits achetés auprès de vendeurs non autorisés.

La garantie d'Ovutek s'étend uniquement aux produits achetés auprès de vendeurs agréés qui sont soumis aux contrôles de qualité d'Ovutek et ont accepté de suivre ses contrôles de qualité.

Toutes les garanties implicites sont limitées à la période de cette garantie limitée.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects ; la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut donc ne pas s'appliquer à votre cas.

Si vous constatez un défaut sur votre produit pendant la période de garantie, veuillez contacter le service client à l'adresse service@ovutek.com. NE jetez PAS votre produit avant de nous avoir contactés. Une fois votre demande approuvée par notre service client, veuillez nous retourner le produit accompagné d'une copie de la facture et du numéro de commande.

Chaque produit Ovutek comprend automatiquement une garantie de 2 ans.

Cette garantie est faite par : Ovutek

Service client

Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions concernant votre nouveau produit, veuillez contacter notre équipe d'assistance clientèle.

Courriel : service@ovutek.com

• Veuillez avoir votre facture de commande et votre numéro de commande à portée de main avant de contacter le service client.



Contactez notre équipe de support client
service@ovutek.com



FABRIQUÉ EN CHINE